

移动式配液平台

- Bioliner容器内衬袋及搅拌系统

Bioliner 内衬袋

按照 SFDA 和ISO9001:2008要求进行生产质量管理
标准洁净生产车间，规范性操作
设计生产和灭菌工艺符合cGMP的操作要求
袋体由五层共挤膜构成，膜材质符合国家I类药包材标准
游体接触层为定改性乙烯 - 丙烯聚合物

特点


柔软而坚韧的袋体，适合作为容器内衬层
去除了容器清洗步骤，节约时间和用水，无需清洁验证
多种容积，最大达500 L (仍可订制更大规格)
可选下部放料口，多种软管与接头形式
内毒素含量 < 0.25 EU/mL
双层独立包装，25 kGy辐照灭菌 (可提供未灭菌型)

应用

培养基、缓冲液等溶液配制和收集
对颗粒数等指标有要求的其它溶液灌装

Bioliner内衬袋可以帮您节省以下隐性成本：

清洁剂和洗涤用的纯水
大量的清洗工时
清洁验证程序
购置多个储液袋的成本
不锈钢储液罐的锈蚀及折旧
或：塑料储液罐的吸附损失、桶体磨损刮花
储液桶堆叠占用大量空间

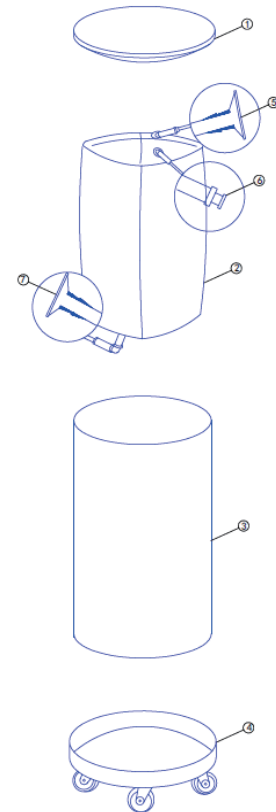

FlexMixer 移动式配液平台

FlexMixer是一类全新的移动式配液平台，结合了称重技术与乐纯 Bioliner一次性内衬袋。

容器系统

Bioliner内衬袋，可配合容器使用。容器为袋体提供良好的刚性支撑。

搅拌系统

转速、处理量、搅拌桨形式多样化，可自由选择。

称重系统

我们可提供各种量程范围的称重系统，按功能特性，分为：
普及型：快速显示重量。
监控型：更高的灵敏度，为精确配液提供支持。



您可以选择任意的模块组合来满足实际需求。

产品规格说明

序号 目录号 描述


I系列 不含管路的Bioliner 袋

1	FB38-1	38 L 敞口袋	可配Nalgene 37L桶使用
2	FB57-1	57 L 敞口袋	可配Nalgene 57L桶使用
3	FB113-1	113L敞口袋	可配Nalgene 113L 桶使用
4	FB208-1	208 L 敞口袋	可配Nalgene 208L桶使用
5	FB303-1	303L敞口袋	可配Nalgene 303L桶使用
6	FB378-1	378 L 敞口袋	可配Nalgene 378L桶使用
7	FB568-1	568 L 敞口袋	可配Nalgene 568L桶使用




II 系列 带有下出水口的Bioliner 袋 (仅接头, 无管路)

1	FB38-2	38 L 敞口袋	下出水口内径1/4英寸, 可配Nalgene 37L桶使用
2	FB57-2	57 L 敞口袋	下出水口内径1/4英寸, 可配Nalgene 57L桶使用
3	FB113-2	113L敞口袋	下出水口内径1/4英寸, 可配Nalgene 113L桶使用
4	FB208-2	208 L 敞口袋	下出水口内径3/8英寸, 可配Nalgene 208L桶使用
5	FB303-2	303L敞口袋	下出水口内径3/8英寸, 可配Nalgene 303L桶使用
6	FB378-2	378 L 敞口袋	下出水口内径3/8英寸, 可配Nalgene 378L桶使用
7	FB568-2	568 L 敞口袋	下出水口内径3/8英寸, 可配Nalgene 568L桶使用

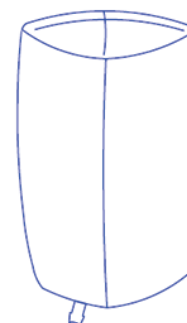

III系列 带有下出水口、管路和管夹、TC口的敞口袋

1	FB38-3	38 L 敞口袋	配Nalgene 37L桶使用, 配内径1/4英寸,外径3/8英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
2	FB57-3	57 L 敞口袋	配Nalgene 57L桶使用, 配内径1/4英寸,外径3/8英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
3	FB113-3	113 L 敞口袋	配Nalgene 113L桶使用, 配内径3/8英寸,外径1/2英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
4	FB208-3	208 L 敞口袋	配Nalgene 208L桶使用, 配内径3/8英寸,外径1/2英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
5	FB303-3	303 L 敞口袋	配Nalgene 303L桶使用, 配内径3/8英寸,外径1/2英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
6	FB378-3	378 L 敞口袋	配Nalgene 378L桶使用, 配内径3/8英寸,外径1/2英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口
7	FB568-3	568 L 敞口袋	配Nalgene 568L桶使用, 配内径3/8英寸,外径1/2英寸硅胶管, 长度20cm, 带3/4英寸TC口

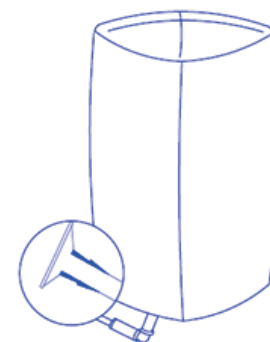

* 如果没有适合您的规格, 请联系我们 (☎ 021-57791703) 。我们将为您提供订制服务。



电话: 86-21-57791703
 传真: 86-21-57791702
 邮箱: flexstable@163.com
 网址: www.lepurechina.com

上海乐纯生物技术有限公司
 Shanghai Lepure Biotech Co., Ltd.

- Single Use System, Chinese Made -