

# 拥有F1的精密，超越移液器的舒适新体验！



纳米银安全卫士

## 健康、舒适、精准、耐用的 Thermo Scientific F1 移液器

### ◆ 健康 —— 首创纳米银盾 F1 移液器

F1 是全球首家将纳米银材料应用于移液器领域的产品。通过缓释银离子，作用于蛋白酶上的巯基，可有效地抑制细菌、真菌、霉菌以及其它微生物的生长。纳米银盾安全卫士能长期有效地防止空气或其他与之接触的微生物对移液器的污染。



### ◆ 舒适 —— 120° 旋转式放松指靠

新颖放松指靠设计，可在 120 度内调节使用，宽大圆润的指靠使您的手部获得最大的舒适感。



### ◆ 舒适 —— 轻巧的移液操作

在所有移液器中，液体推出和吸头推出用力最小。（芬兰大学职业病研究所提供数据）

平滑、稳定地移液操控，降低重复压力损伤(RSI)症状的风险。在移液过程中将获得更好的准确度和精确度，协助您长期获得更好地移液结果。

### ◆ 精准 —— 液量联动装置


通过数字显示和微量刻度尺相配合，将 0.2-2ul 移液器的步进提高至 0.002ul，达到移液精准之最高境界。为避免人手部温度对移液精确度的影响，巧妙的将液体联动装置与腔体分离，使其处于一个相对恒温的环境，使移液器的准确度和精确性以及耐用性都得到较大的提升。

### ◆ 精准 —— 专利性的超强吹出设计，确保最后一滴完全吹出

创新的伸缩性活塞增加了吹出能力，并能有效防止吹出时的毛细现象。超强吹出能力确保了高效稳定的微量移液。

### ◆ 精准 —— 巧妙的“设定、锁定”防遗忘旋钮

巧妙的将液量锁定和移液操作一步完成，当液量锁定时，操控旋钮可以自由旋转，确保顺畅稳定的移液，而无须担心移液时误操作引起的液量改变。如需重新设定液量，只需轻轻拔出液量设定按钮，重新设定体积。

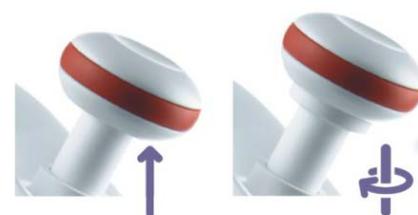

### ◆ 耐用 —— 在线校准和维修服务网络

在线校准软件 <http://www.thermo.com.cn/Category397.html> 可以轻松为移液器的健康状态进行诊断。各地维修服务中心或赛默飞世尔科技提供专业移液器校准、保养服务。|