

# 人催乳素 ELISA 试剂盒

产品编号: **SEKH0298**

适用于人血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断

订购热线: 400-968-6088\*技术支持邮箱:[service@solarbio.com](mailto:service@solarbio.com)

公司官网:[www.solarbio.com](http://www.solarbio.com)

# 目录

背景介绍.....	01
检测原理.....	01
注意事项.....	02
安全提示.....	02
试剂盒组成及储存.....	03
自备实验器材.....	03
样品收集及储存.....	03
试剂准备.....	04
检测步骤.....	06
结果判断.....	06
参数表征.....	07
参考文献.....	09
常见问题分析及解决办法.....	10


### 背景介绍:

催乳素(PRL)是一种神经内分泌垂体激素,主要作用于乳腺,促进泌乳,但在男性和女性中都有多向作用。催乳素一般含 199 个氨基酸,主要有两种存在形式,25 kDa 的糖基化单体和 23 kDa 的非糖基化单体。人催乳素与小鼠和大鼠催乳素的氨基酸序列同源性分别为 60%和 63%,大鼠催乳素能激活人催乳素受体。翻译后修饰如聚合作用、裂解作用及糖基化,均可改变催乳素的活性。非糖基化催乳素由垂体产生,并在分泌前包装在储存颗粒中。据报道,糖基化催乳素是组成型分泌表达,具有较低的生物活性,并能更快地从体液循环中去除。组织蛋白酶 D 或软骨细胞基质金属蛋白酶的切割可产生 N 端 16 kDa 的抗血管生成片段(又称血管抑制素。另外,凝血酶可以产生非抗血管生成的 C-末端 16 kDa 片段。在人类中,被称为巨催乳素(>150 kDa)的催乳素和 IgG 的复合物可产生催乳素自身抗体。巨催乳素降解速度较慢,从而导致血清或血浆中催乳素水平升高,而泌乳活性下降。

### 检测原理:

Solarbio (Solarbio®) ELISA 试剂盒采用基于双抗体夹心法的酶联免疫吸附检测技术。将抗人 Prolactin 单克隆抗体包被在酶标板上;分别加入梯度稀释的标准品和预稀释的样本,标准品和样本中的人 Prolactin 会与酶标板上的包被抗体充分结合;洗板后加入生物素化抗人 Prolactin 抗体,该抗体会与板上包被抗体捕获的标准品和样本中的人 Prolactin 发生特异性结合;洗板后加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的链霉亲和素,生物素与链霉亲和素会发生高强度的非共价结合;洗板后加入显色剂底物 TMB,若反应孔中样品存在不同浓度的人 Prolactin,则 HRP 会使无色 TMB 变成不同深浅(正相关)的蓝色物质,加入终止液后反应孔会变成黄色;最后,在  $\lambda_{\max}=450\text{ nm}$  ( $\text{OD}=450\text{ nm}$ )处测定反应孔样品吸光度(OD),样本中的人 Prolactin 浓度与 OD 成正比,通过绘制标准曲线和四参数拟合软件便可计算出样本中人 Prolactin 的浓度。

### 原理图:

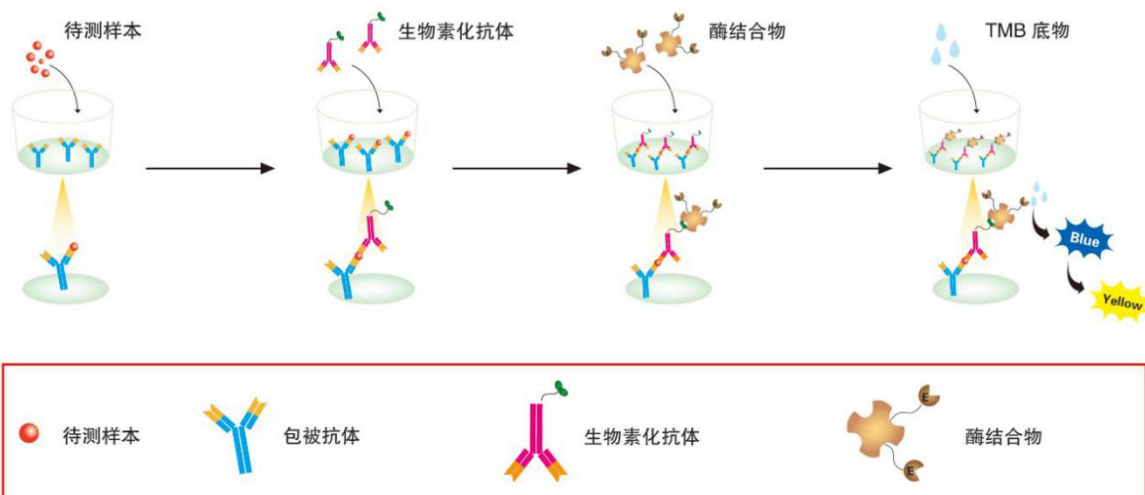

**注意事项:**

1. 试剂盒应在有效期内使用，请不要使用过期的试剂。
2. 试剂盒未使用时应保存在 2-8℃冰箱，已复溶但未用完的标准品，请丢弃。
3. 试剂盒使用前请在室温恢复 30min，且充分混匀试剂盒里的各种成份及制备的样品。
4. 在试验中标准品和样本建议作复孔检测，且加入试剂的顺序应保持一致。
5. 为避免交叉污染，请在试验中使用 1 一次性试管，枪头，封板膜（※）及洁净塑料容器。
6. 浓缩生物素化抗体和浓缩酶结合物的体积较少，在运输过程中微量液体会沾到管壁及瓶盖上，使用前请离心处理（5-10 S 即可），使管壁上的液体集中在管底部，取用时，请用移液器小心吹打几次。
7. 除了试剂盒中的浓缩洗涤液和终止液可以通用外，请不要使用其他来源试剂盒内含的试剂代替本试剂盒中的某单个组分。
8. 为保证结果准确，每次检测均需做标准曲线。

**安全提示:**

试剂盒中的终止液为酸性溶液，操作人员在使用时请戴上手套并注意防护；在操作过程中也要避免试剂接触皮肤和眼睛，如果不慎接触，请用大量清水清洗；检测血液样本及其它体液样本时，请按国家生物实验室安全防护有关管理规定执行。

**试剂盒组成及储存:**

试剂盒组成	规格 (96T)	规格 (48T)	保存条件
抗体预包被酶标板	8*12	8*6	2-8°C
标准品	2 支	1 支	-20 °C
SR1 标准品/样本稀释液	16ml/瓶	8 ml/瓶	2-8°C
浓缩生物素化抗体	120ul(100X)	60ul(100X)	2-8°C
SR2 生物素化抗体稀释液	16ml/瓶	8 ml/瓶	2-8°C
浓缩酶结合物 (避光)	120ul(100X)	60ul(100X)	2-8°C
SR3 酶结合物稀释液	16ml/瓶	8 ml/瓶	2-8°C
浓缩洗涤液 (20×)	30ml/瓶	15 ml/瓶	2-8°C
显色底物 (避光)	12ml/瓶	6 ml/瓶	2-8°C
终止液	12ml/瓶	6 ml/瓶	2-8°C
封板胶纸	4 张	2 张	
说明书	1 份	1 份	

**自备实验器材 (不提供, 可代购)**

1. 酶标仪 (主波长 450nm, 参考波长 630nm)
2. 高精度移液器及一次性吸头: 0.5-10,2-20,20-200,200-1000 $\mu$ l
3. 洗板机或洗瓶
4. 37°C孵育箱
5. 双蒸水, 去离子水, 量筒等
6. 稀释用聚丙烯试管

### 样本收集及储存:

#### 1. 细胞培养上清:

将细胞培养基移至无菌离心管, 在 4°C 条件下 1000 ×g 离心 10 min, 然后将上清等量分装于小 EP 管并于 -20°C 下保存 (24 小时内检测可放入 2-8°C 储存), 避免反复冻融。

#### 2. 血清样本:

室温血液自然凝固 20 min 后, 在 4°C 条件下 1000×g 离心 10 min, 然后将上清等量分装于小 EP 管并于 -20°C 下保存 (24 小时内检测可放入 2-8°C 储存), 保存过程中如有沉淀, 请再次离心, 避免反复冻融。

#### 3. 血浆样本:

将全血收集到含抗凝剂的管中, 根据标本的实际要求选择 EDTA, 柠檬酸钠或肝素作为抗凝剂, 混合 20 min, 在 4°C 条件下 1000×g 离心 10 min, 然后将上清等量分装于小 EP 管并于 -20°C 下保存 (24 小时内检测可放入 2-8°C 储存), 避免反复冻融。


**※注意:** 血清血浆样本避免使用溶血、高血脂样本, 以免影响检测结果; 如果样本中的靶标物检测浓度高于标准品的最高值, 请将样品做适当倍数稀释后检测, 建议正式实验前做预实验以确定稀释倍数。

### 试剂准备:

1. 试剂回温: 首先在实验前 30 min 将试剂盒, 待测样本放置于室温下, 浓缩洗涤液如出现结晶, 请放入 37°C 温浴直到结晶全部溶解。

2. 配制洗涤液: 预先计算出稀释后的洗涤液使用体积, 然后用双蒸水或去离子水将 20 倍浓缩洗涤液稀释成 1 倍应用液, 未用完的浓缩洗涤液放入 4°C 冰箱保存。

3. 标准品梯度稀释: 加入标准品/样本稀释液 (SR1) 1ml 至冻干标准品中, 静置 15 分钟待其完全溶解后轻轻混匀 (浓度为 2000pg/ml), 然后按照以下浓度进行 2 倍稀释: 1000、500、250、125、62.5、31.25、15.625pg/ml 进行稀释, 1000pg/ml 为标准曲线最高点浓度, 标准品/样本稀释液 (SR1) 作为标准曲线的零点 (0pg/ml)。复溶过的标准品原液 (2000pg/ml) 未用完的应废弃或根据需要按照一次用量分装, 并将其贮存在 -20~-80°C 冰箱, 具体如下图。

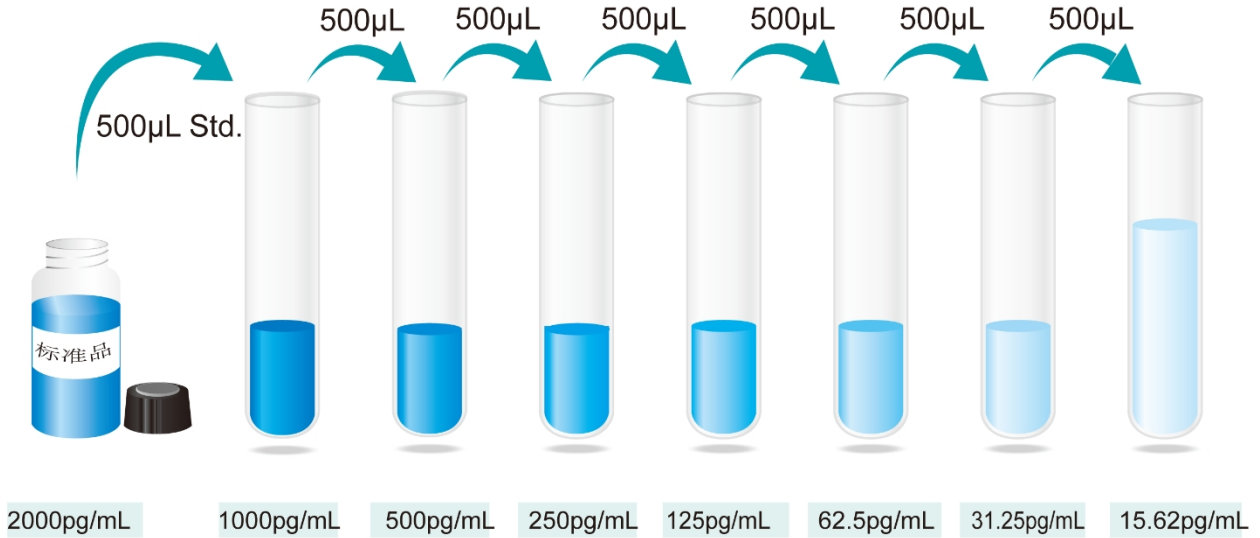

4. 生物素化抗体工作液：预先计算好试验所需用量，用检测稀释液（SR2）将100倍抗体浓缩液稀释成1倍应用工作液（稀释前充分混匀），请在30分钟内加入到反应孔中。

生物素化抗体工作液具体稀释方法如下：

板条	浓缩生物素化抗体（1:100）： µL	检测稀释液（SR2）： µL
2	20	1980
4	40	3960
6	60	5940
8	80	7920
10	100	9900
12	120	11880

5. 酶结合物工作液：按每次试验所需用量配制，用酶结合物稀释液（SR3）将100倍浓缩酶结合物稀释成1倍应用工作液（稀释前离心），请在30分钟内使用。

酶结合物工作液具体稀释方法如下：

板条	浓缩酶结合物（1:100）： µL	检测稀释液（SR3）： µL
2	20	1980
4	40	3960
6	60	5940
8	80	7920
10	100	9900
12	120	11880

6. 洗涤方法:

- 自动洗板: 甩尽酶标板孔中液体, 在厚透吸水纸上拍干, 注入洗涤液为 300ul/孔, 注与吸出间隔为 30 秒, 洗板 5 次。
- 手工洗板: 甩尽酶标板孔中液体, 在厚透吸水纸上拍干, 用洗瓶加入洗涤液 300ul/孔, 静止 30 秒后甩净酶标板孔中液体, 在厚透的吸水纸上拍干, 洗板 5 次。

**检测步骤**

实验前30 min,拿出试剂盒,恢复至室温,加入标准品/样本前,请洗板3次并甩干

**结果**

1.用

用

2.计

3.以

值

4.若

6

长检测,请

过对应OD


solarbio.net



**参数表征:**

**1. 数据及标准曲线**

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.089	0.085	0.087	---
15.625	0.146	0.142	0.144	0.057
31.25	0.185	0.181	0.183	0.096
62.5	0.293	0.291	0.292	0.205
125	0.457	0.252	0.355	0.268
250	0.807	0.801	0.804	0.717
500	1.465	1.461	1.463	1.376
1000	2.504	2.501	2.503	2.416

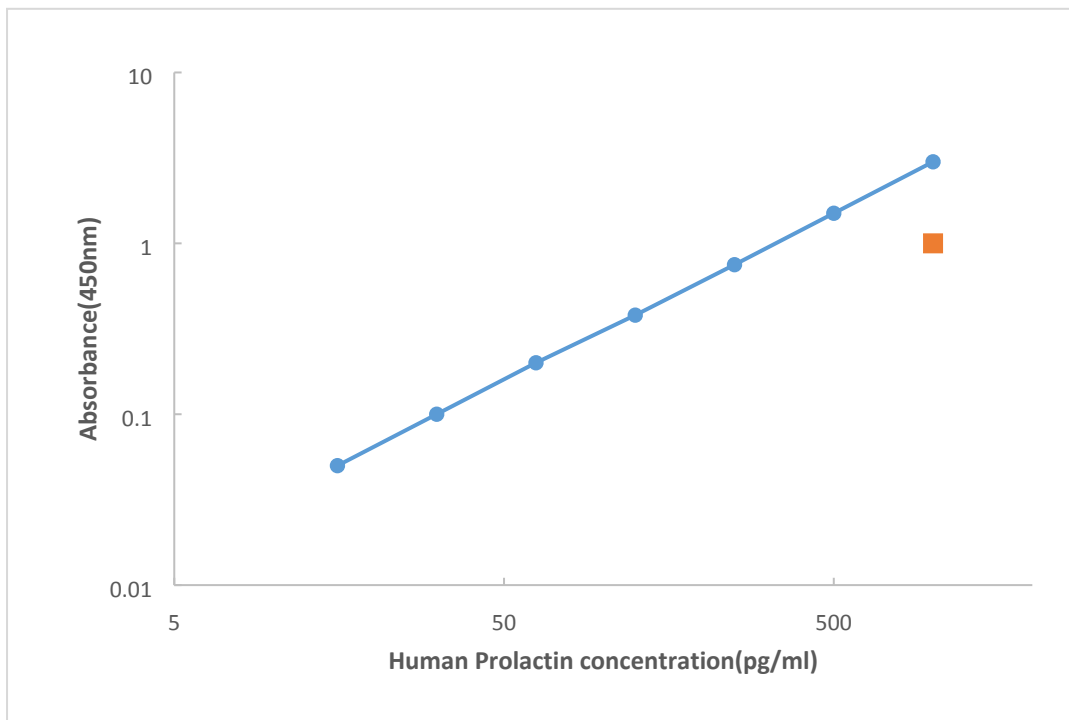

本图仅供参考，应以当次试验标准品绘制的标准曲线计算人 Prolactin 的样本含量。

## 2. 灵敏度:

最低可检测人 Prolactin 浓度达 8 pg/ml,

20 个零标准品浓度 OD 的平均值加上两个标准差, 计算相应的可检测浓度。

## 3. 特异性:

不与人 Chorionic Gonadotropin、Chorionic Gonadotropin  $\alpha$ 、Follicle-stimulating Hormone  $\beta$ 、Growth Hormone、Luteinizing Hormone  $\beta$ 、Thyroid-Stimulating Hormone  $\beta$ , 小鼠 Prolactin 等反应。

## 4. 重复性:

板内, 板间变异系数<10%。

## 5. 回收率:

在选取的健康人血浆、细胞培养上清中加入 3 个不同浓度水平的人 Prolactin, 计算回收率。

样本类型	平均回收率 (%)	范围 (%)
血浆	97	90—104
细胞培养上清	102	92—112

## 6. 线性稀释:

分别在选取的 4 份健康人血浆和细胞培养上清中加入高浓度人 Prolactin, 在标准曲线动力学范围内进行稀释, 评估线性。

稀释比例	回收率(%)	血浆	细胞培养上清
1:2	平均回收率 (%)	98	103
	范围(%)	88—108	95—112
1:4	平均回收率 (%)	96	104
	范围(%)	90—102	88—102

**参考文献:**

1. Cooke, N.E. et al. (1981) *J. Biol. Chem.* 256:4007.
2. Grattan, D.R. and I.C. Kokay (2008) *J. Neuroendocrinol.* 20:752.
3. Ben-Jonathan, N. et al. (2008) *Endocr. Rev.* 29:1.
4. Bernichtein, S. et al. (2010) *J. Endocrinol.* 206:1.
5. Langan, E.A. et al. (2012) *Arch. Dermatol. Res.* 304: 115.
6. Goffin, V. et al. (2011) *Nat. Rev. Urology* 8:597.
7. Lewis, U.J. et al. (1985) *Endoc.* 116:359.
8. Price, A.E. et al. (1995) *Endoc.* 136:4827.
9. Hoffmann, T. et al. (1993) *J. Endoc. Invest.* 16:807.
10. Cole, E. et al. (1991) *Endoc.* 129:2639.
11. Piwnica, D. et al. (2006) *Mol. Endocrinol.* 20:3263.
12. Macotela, Y. et al. (2006) *J. Cell Sci.* 119:1790.
13. Triebel, J. et al. (2011) *IUBMB Life* 63:806.
14. Olukoga, A.O. and J.W. Kane (1999) *Clin. Endocrinol. (Oxf.)* 5:119.
15. Shimatsu, A. and N. Hattori (2012) *Clin. Dev. Immunol. Dec.* 4 [Epub ahead of print].

**常见问题及解决方法：**

问题	可能原因	解决方法
<b>高背景或阴性对照值偏高</b>	洗板不充分	将洗涤液注入反应孔充分洗涤，彻底拍干孔中液体
	酶结合物过量	检查酶稀释度，按说明书标识的稀释度稀释
	底物污染	加底物前检查底物是否为透明无色，请勿用变蓝的底物，重新用新的底物试验
	阴性对照孔被阳性对照污染	注意洗涤时不要把洗液溢出孔外，不使阴阳对照孔液体连接一起
	不同批次试剂混用	检查试剂批号，请勿用不同批次试剂
<b>显色信号弱</b>	试剂过期	检查试剂盒有效期，请勿用过期试剂
	孵育时间过短	按说明书中规定的时间孵育
	试剂污染	检查试剂是否污染，请勿用污染的试剂
	酶标仪滤光片不匹配	检查酶标仪设置及滤光片是否匹配
	试剂盒平衡不充分	确保试剂盒试验前平衡至室温
	显色时间不够	增加底物显色时间
<b>无显色信号</b>	检测抗体、酶、或显色剂漏加	检查试验操作流程，重复试验
	酶被叠氮钠污染	请使用重新配制的试剂
	试剂添加顺序有误	检查复核试验添加顺序、流程，重复试验
<b>标曲佳但样品孔无信号</b>	样品中靶标物含量低或样品中无靶标物	设置阳性对照，重复实验
	样品基质效应影响检测	重新稀释样品后复测
<b>标曲佳但样品信号偏高</b>	样品中待检物含量超过标准曲线范围	重新稀释样品后复测
<b>边缘效应</b>	孵育温度不均衡	孵育时每步均使用新的封板胶纸，避免在环境温度变化大的地方孵育，勿叠放反应板